

Sicherheit neu gedacht

aluderm⁺ Sortiment



04 Wundversorgung

09 Reanimation

21 Erste-Hilfe-Koffer

26 Immobilisation

27 Infusion




Weitere Informationen auf
www.aluderm.de

Eine Marke der W.Söhngen GmbH

Seit mehr als 100 Jahren stehen wir für Qualität, Innovation und Vertrauen in der Wundversorgung. Wir sind seit Jahrzehnten bekannt für unsere orangefarbenen Erste-Hilfe-Koffer und ein breites Markensortiment für die Versorgung kleiner und großer Verletzungen. Damit man uns unser Alter aber nicht sofort ansieht, haben wir an unserer Optik gearbeitet.

Ab sofort bündeln wir unsere Erfahrung und Qualität in einem Namen und einem Look:

aluderm⁺
erlebe Vertrauen

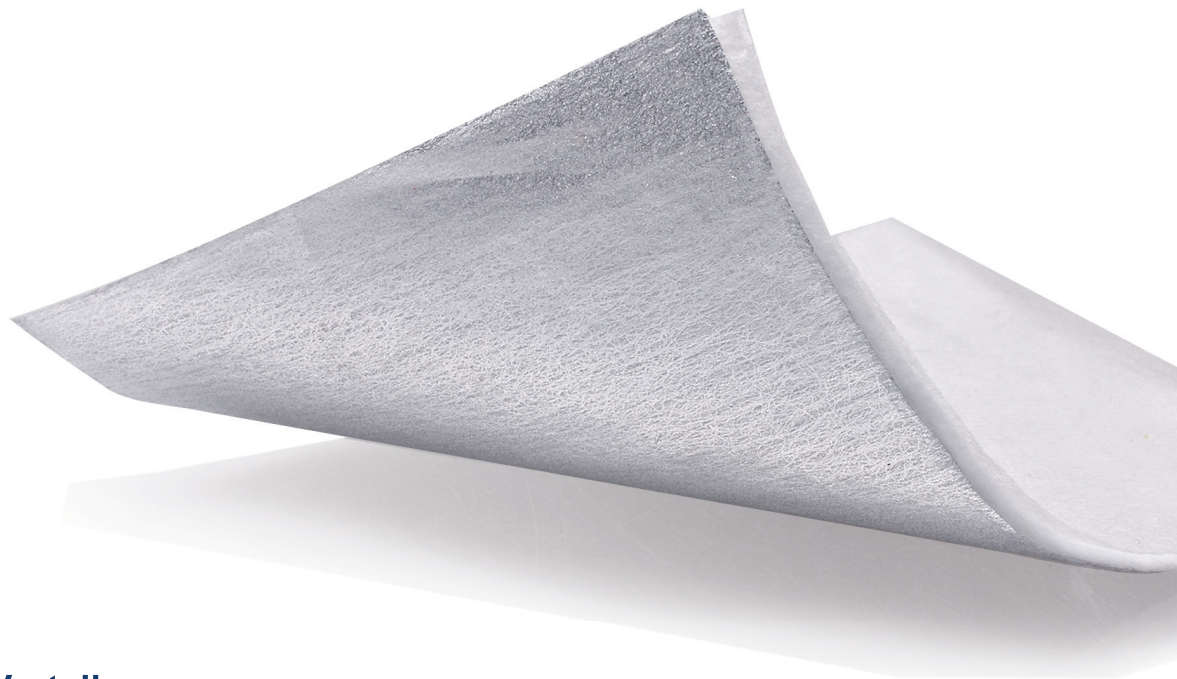

Ihre Vorteile

- hoher Wiedererkennungswert durch modernes, einheitliches Design
- alle wichtigen Informationen auf einen Blick
- innovative Produktlösungen, bewährte Qualität
- der neue **aluderm⁺** Shop enthält alle aktualisierten Produktinformationen

aluderm⁺ Verbandstoffe

- für Brandwunden 1. und 2. Grades geeignet
- fördern die Wundheilung
- verhindern die Bildung von Wundschorf
- reduzieren die Gefahr einer Narbenbildung

aluderm⁺ Verbände und Kompressen

Die aluderm⁺ Kompressen und Verbände überzeugen durch ihre erstklassige Qualität und eine besondere Materialkombination aus aluminiumbedampfter Oberfläche, einem starken Saugkern und einem hydrophoben PP-Vlies. Die aluminiumbedampfte Oberfläche sorgt dafür, dass die Wunde nicht mit der Wundauflage verklebt. Das Wundsekret wird schnell in den Saugkern transportiert und bleibt dort. Dies sorgt für eine sanfte, schmerzarme Versorgung und eine bestmögliche Wundheilung.

Ob bei Schürfwunden, Schnittverletzungen, Brandwunden oder anderen Hautverletzungen: aluderm⁺ Kompressen und Verbände sind so entwickelt, dass sie sowohl im professionellen Bereich als auch im Alltag eine sichere und komfortable Lösung bieten.



Inhalt

aluderm20 Verbandtuch 80 × 120 cm
 aluderm20 Verbandtuch 60 × 80 cm
 aluderm20 Spezial-Druckverbandpäckchen
 aluderm20 Komresse einzeln 10 × 10 cm
 aluderm20 Augenkomresse
 aluderm20 Verbandpäckchen DIN mittel
 aluderm20 Verbandpäckchen DIN mittel

Art.-Nr.

1003206
 1003205
 1002001
 1003208
 1003340
 1003372
 1003373



aluderm⁺ Wundpflaster

Die aluderm⁺ Wundauflage besteht aus einem weichen Vliesstoff mit aluminiumbedampfter Oberfläche, die ein Verkleben mit der Wunde verhindert und somit einen nahezu schmerzfreien Pflasterwechsel ermöglicht. Zudem sind alle aluderm⁺ Wundpflaster für Verbrennungen 1. und 2. Grades geeignet. Durch ihre atmungsaktive Struktur bieten die Wundpflaster ein angenehmes Hautgefühl – bei optimalem Schutz vor äußeren Einflüssen wie Schmutz und Keimen. Erhältlich als Wundpflaster klassisch, sensitiv sowie wasserfest.



Inhalt

aluderm Wundpflaster sensitiv weiß 6 × 10 cm
 aluderm Wundpflaster sensitiv weiß 8 × 10 cm
 aluderm Wundpflaster Mix wasserfest
 aluderm Wundpflaster sensitiv weiß 4 × 10 cm
 aluderm Wundpflaster Mix weiß, sensitiv
 aluderm Wundpflaster Mix transparent, wasserfest
 aluderm Kinder Wundpflaster Mix sensitiv
 aluderm Wundpflaster klassisch 8 × 10 cm
 aluderm Fingerstrips elastisch 2 × 12 cm
 aluderm Wundpflaster klassisch 6 × 10 cm
 aluderm Wundpflaster Mix klassisch

Art.-Nr.

1008314
 1008315
 1008317
 1008313
 1008316
 1008300
 1008312
 1008303
 1008306
 1008302
 1008304

aluderm20⁺ midori

Innovative Wundversorgung mit Bambusfasern, dafür stehen die Verbandstoffe von **aluderm20⁺ midori**. Die besonders sanfte und zugleich leistungsstarke Wundauflage besitzt eine Mittellage aus 100 % Bambusfasern. Die glatte, großporige Oberfläche verhindert ein Verkleben mit der Wunde und ermöglicht einen angenehmen, schmerzarmen Verbandwechsel. Das Bambusvlies überzeugt durch seine außergewöhnlich hohe Saugfähigkeit, nimmt Exsudat schnell auf und speichert es zuverlässig, sodass die Wunde sicher gepolstert bleibt.

Die Kompresse ist weich, atmungsaktiv, hypoallergen, fasert nicht und eignet sich ideal für die Versorgung aller oberflächlichen, auch stark nässenden Wunden. Zusätzlich lässt sie sich beidseitig zur Wunde anwenden und bietet so maximale Flexibilität im Einsatz.

**Warum Bambus?**

- Bambus ist sehr schnell nachwachsend (bis zu mehrere cm pro Tag)
- Rohstoff benötigt wenig Wasser, keine Pestizide
- reduzierte CO₂-Bilanz im Vergleich zu Baumwolle/Synthetik
- Haltbarkeit 20 Jahre – weniger Abfall, weniger Ersatzbeschaffung
- natürliche gedachte Ressource, medizintechnisch aufgewertet



aluderm20⁺ midori Verbandstoffe

Die richtige Wundversorgung beginnt mit der Wahl des passenden Verbandstoffs. **aluderm20⁺ midori** Kompressen und Verbandpäckchen bieten Ihnen eine sorgfältig abgestimmte Auswahl für jede Situation – ob kleinere Schnittverletzungen, größere Wunden oder die professionelle Nutzung im medizinischen Umfeld. Durch ihre hohe Saugfähigkeit sind sie ideal für ein erfolgreiches Wundmanagement, ohne dass der Verband dabei seine Form verliert. Gleichzeitig sind sie sanft zur Haut, vermeiden Reizungen und lassen sich auch bei empfindlicher Haut angenehm tragen.

Von kompakten Einzelkompressen bis hin zu handlichen Verbandpäckchen, **aluderm20⁺ midori** Wundauflagen sind in unterschiedlichen Größen und Formaten erhältlich. So finden Sie immer genau den Verbandstoff, der optimal sitzt und zuverlässig schützt.

Vorteile auf einen Blick

- extrem hohe Saugfähigkeit
- 20 Jahre Haltbarkeit
- Wundauflage mit Wundkissen aus 100% Bambusfaser
- große, glatte Antihaft-Kontaktfläche
- atmungsaktiv & hypoallergen
- beidseitig zur Wunde anwendbar



Inhalt

aluderm20 midori Kinder Komresse 6×6 cm
 aluderm20 midori Komresse einzeln 10×10 cm
 aluderm20 midori Verbandpäckchen klein
 aluderm20 midori Verbandpäckchen mittel
 aluderm20 midori Verbandpäckchen groß

Art.-Nr.

1050018
 1002017
 1002011
 1002012
 1002013

aluderm⁺ Erste-Hilfe-Materialien

Die Erste-Hilfe-Materialien von aluderm⁺ zeichnen sich durch ihre hochwertige Verarbeitung und eine innovative Zusammenstellung aus. Entwickelt für den professionellen Einsatz, aber ebenso geeignet für den Alltag, bieten sie zuverlässige Hilfe bei kleineren Verletzungen, Unfällen oder akuten Notfällen.

Ob zu Hause, bei der Arbeit, beim Sport oder auf Reisen: aluderm⁺ begleitet Sie überall dort, wo schnelle Hilfe gefragt ist. Die Produkte sind durchdacht, kompakt und sofort einsatzbereit – ideal für unterwegs, im Auto, in der Handtasche oder im Rucksack. Dank ihrer sehr guten Qualität und der praxisnahen Anwendungsfreundlichkeit lassen sie sich mühelos in jede Notfallsituation integrieren. Gerade unterwegs, ob auf Ausflügen, im Urlaub oder im Straßenverkehr – kommt es auf schnellen Zugriff, Zuverlässigkeit und Hygiene an.

aluderm⁺ bietet genau das: leicht handhabbare Materialien, hygienisch verpackt und optimal aufeinander abgestimmt. So können kleine Verletzungen sicher versorgt werden – ohne Zeitverlust und mit dem guten Gefühl, bestens ausgerüstet zu sein.



Inhalt

aluderm Rettungsdecke Kinder 120×160 cm gold/silber mit Box
 aluderm Rettungsdecke 160×210 cm gold/silber mit Box
 aluderm Feuchttücher zur Reinigung unverletzter Haut à 10 Stück
 aluderm Fixierbinde elastisch 4m×6 cm mit Box à 3 Stück
 aluderm Fixierbinde elastisch 4m×8 cm mit Box à 3 Stück
 aluderm Kälte-Sofort Kompressen 15×21 cm mit Box
 aluderm Kinder Kälte-Sofort Kompressen 15×21 cm mit Box
 aluderm Dreieckstuch 96×96×136 cm weiß mit Box
 aluderm Handschuh-Set Vinyl groß mit Box
 aluderm Schere mit Box
 aluderm20 Verbandpäckchen mittel mit Box

Art.-Nr.

1008325
 1008324
 1009309
 1008327
 1008328
 1008329
 1008330
 1008326
 1008331
 1008332
 1008322



Einsatzbereit. Jederzeit. Überall.

Die AEDs von **aluderm+** wurden mit Blick auf Zuverlässigkeit, Robustheit (IP55) und intuitive Bedienbarkeit entwickelt. Jedes Gerät wurde unabhängig geprüft und erfüllt die höchsten internationalen Sicherheits- und Qualitätsstandards.

Ausgestattet mit modernster Technologie – darunter Sprachanweisungen, intuitive Grafiken und eine intelligente Analyse zur Schockabgabe und HLW-Unterstützung – bieten sie im Ernstfall klare Führung und Sicherheit.

Flottenmanagement möglich: Dank integrierter Konnektivität lässt sich die Einsatzbereitschaft der Geräte jederzeit aus der Ferne überwachen – ideal für Unternehmen, öffentliche Einrichtungen und Rettungsdienste.



*Funkmodul separat erhältlich




aluderm⁺ AED A1

Klare visuelle Darstellungen, ergänzt durch LED-Beleuchtung und deutlich hörbare Sprachbefehle, führen den Benutzer sicher durch die notwendigen Schritte und maximieren die Überlebenschancen des Patienten.

Ihre Vorteile auf einen Blick:

- Einfache Benutzerführung durch Audio und Piktogramme
- Extrem benutzerfreundlich – eine der einfachsten Bedienoberflächen am Markt
- Schockabgabe in nur 7 Sekunden
- Batterie mit bis zu 200 Schocks und 5 Jahren Standzeit
- Intelligente Pads mit 5 Jahren Lebensdauer ab Herstellungsdatum
- Automatische EKG-Aufzeichnung bis zu 8 Stunden
- Sturzresistent – getestet aus 1,5 Metern Fallhöhe
- Tägliche Selbsttests garantieren Einsatzbereitschaft
- HLW-Unterstützung mit Metronom-Funktion
- Integriertes Analysetool für Schrittmachererkennung
- Schockfreigabe nur bei eindeutigen Kammerflimmern oder -flattern
- Kindertaste zum Umschalten des AED in den Kindermodus (50 J)

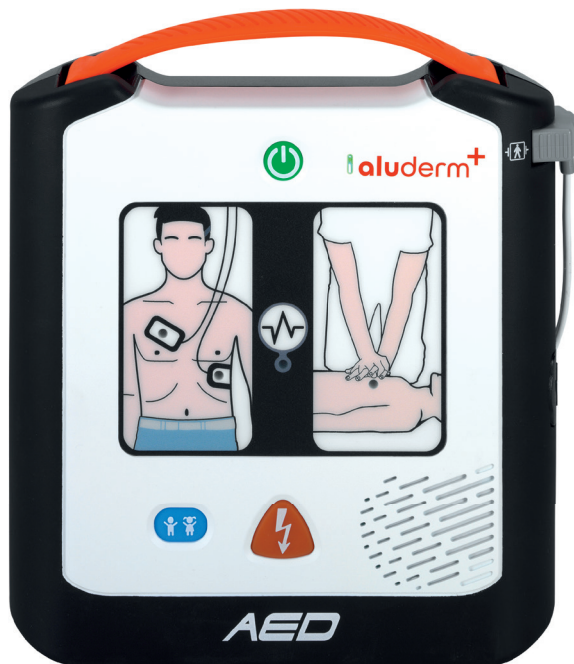

aluderm AED A1	
Größe (H × B × T)	23,2 × 20,9 × 5,9 cm
Gewicht	1,5 kg
Schutzklasse	IP55
Fernüberwachung	Ja
Farbdisplay	Nein
Sprachtaste	Nein
Kindertaste	Ja

Inhalt

aluderm AED A1

aluderm AED Zubehör

AED Elektrodenpads
AED Batterie
aluderm AED-Rea-Set
aluderm Notfallset Blutstillung

Art.-Nr.

0102208

0102205

0102204

1010275

0101126



aluderm⁺ AED A2

Der 5-Zoll-LCD-Farbbildschirm des AED A2 liefert klare, visuelle Anweisungen, die Schritt für Schritt durch die Massnahmen führen. Gleichzeitig sorgen präzise Sprachansagen für eine schnelle, effektive und sichere präklinische Notfallversorgung sowie für die Einhaltung der Basismaßnahmen zur Wiederbelebung. Diese Funktionen sind besonders hilfreich für sehbehinderte oder schwerhörige Anwender und gewährleisten eine barrierefreie Nutzung.

Ihre Vorteile auf einen Blick:

- Einfache Audio- und visuelle Anleitung für den Benutzer
- Extrem benutzerfreundlich – eine der einfachsten Bedienoberflächen am Markt
- Schockabgabe in nur 7 Sekunden
- Batterie mit bis zu 200 Schocks und 5 Jahren Standzeit
- Intelligente Pads mit 5 Jahren Lebensdauer, ab Herstellungsdatum
- Automatische EKG-Aufzeichnung bis zu 8 Stunden
- Sturzresistent – getestet aus 1,5 Metern Fallhöhe
- Tägliche Selbsttests garantieren Einsatzbereitschaft
- HLW-Unterstützung mit Metronom-Funktion
- Integriertes Analysetool für Schrittmachererkennung
- Schockfreigabe nur bei eindeutigen Kammerflimmern oder -flattern
- Kindertaste zum Umschalten des AED in den Kindermodus (50 J)



aluderm AED A2	
Größe (H × B × T)	23,2 × 20,9 × 5,9 cm
Gewicht	1,5 kg
Schutzklasse	IP55
Fernüberwachung	Ja
Farbdisplay	5-Zoll-LCD-Farbbildschirm
Sprachtaste	Drei-Sprachen-Option
Kindertaste	Ja

Inhalt

aluderm AED A2

aluderm AED Zubehör

AED Elektrodenpads
AED Batterie
aluderm AED-Rea-Set
aluderm Notfallset Blutstillung

Art.-Nr.

0102209

0102205
0102204
1010275
0101126

AED-Spezifikationen

DEFIBRILLATOR

Wellenform: Biphasische truncierte exponentielle (BTE) Wellenform.

Impedanzbereich: 20–180 Ω .

Energieniveau:

Erwachsene, Energie abgegeben bei 50 Ω

Impedanz: 150 J.

Kind, Energie abgegeben bei 50 Ω Impedanz: 50 J.

HLW-Unterstützung: Die HLW-Anweisungen umfassen Metronom und detaillierte Anweisungen für die HLW-Anwendung.

HLW-Protokoll: Entspricht den ERC/AHA 2020 Richtlinien.

Lade-/Entladungszeit: Die Zeit von der Aufforderung „Schock empfohlen“ bis zur Schockabgabe beträgt 7 Sekunden.

ARRHYTHMIE ANALYSE

Genauigkeit: Entspricht IEC60601-2-4.

Analysezeit: Typischerweise 8 Sekunden.

STEUERUNG

Schocksteuerung: Halbautomatisch (drücken Sie die Schocktaste, um Energie abzugeben).

Sprachtaaste (AED-3): Benutzer können zwischen der primären und sekundären Sprache umschalten, je nach verfügbarer Sprachoption.

Zertifizierung: ISO13485, CE-Zertifizierung.

Sicherheitsstandard:

IEC 60601-1:2005+A1:2012

IEC 60601-2-4:2010+AMD1:2018

IEC 60601-1-2:2014

IEC 60601-1-12:2014

BENUTZEROBERFLÄCHE

Anzeige: AED-1 verfügt über eine 114 mm (H) x 87 mm (B) Grafiktafel, während der AED-3 einen 5-Zoll-LCD-Bildschirm mit einer Größe von 105 mm (H) x 65 mm (B) hat.

Auflösung: 800 x 480 px.

Benutzerführung: AED-1 bietet LED-Lichter, eine grafische Benutzeroberfläche sowie Sprachanweisungen. AED-3 verfügt über einen Farb-LCDBildschirm, Animationen, Sprachanweisungen und bietet zweisprachige Textansagen.

Lautstärkeregelung: Die Lautstärke ist über die App anpassbar.

Gerätstatusanzeige: Visuelle und akustische Indikatoren überwachen den Status des Hauptgeräts, der Elektroden und der Batterie. Ein blinkendes grünes Licht zeigt an, dass das Gerät normal funktioniert. Ein blinkendes rotes Licht zeigt an, dass das Gerät fehlerhaft ist.

UMGEBUNGSPARAMETER

Betriebs-/Lagertemperatur: -10 °C bis +50 °C.

Betriebstemperatur für 1 Stunde

(Extremkälte): -20 °C.

Kurzfristige Lager-/Transporttemperatur:

-40 °C bis +70 °C, innerhalb einer Woche, mit installierter Batterie und entfernten Pads.

Atmosphärischer Druck: 59,4 kPa bis 106 kPa.

Relative Luftfeuchtigkeit: 5% bis 95% (keine Kondensation).

Schutzart: IP55.

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN (INKL. GRIFF)

Höhe: 232 mm.

Breite: 209 mm.

Tiefe: 59 mm.

Gewicht: 1,5 kg (inkl. Batterie und Pads).

Erträgliche Aufprall-/Sturzfestigkeit: kann einen freien Fall aus einer Höhe von 1,5 m auf harten Oberflächen ohne Schäden ertragen.

BATTERIE

Typ: Lithium-Mangandioxid-Batterie (Li/MnO₂), nicht wiederaufladbar, 12V/3000mAh.

Kapazität: Bei 20 °C $\pm$ 2 °C kann die neue Batterie bis zu 200 $\pm$ 10 Schocks bei 150J abgeben.

Betriebsdauer (Standby): 5 Jahre (typisch).

Status niedriger Batterieladung: Die Batterie kann dennoch $\geq$ 10 Mal bei 150J verwendet werden.

PADS

Pads: Geeignet für Erwachsene und Kinder.

Haltbarkeit/Betriebsdauer (Standby): 5 Jahre (typisch, ab Herstellungsdatum).

Kabellänge: 1,1 m.

Aufbewahrungsort: Im Fach auf der Rückseite des Geräts.

DATENAUFZEICHNUNG

Speichertyp: Interner digitaler Speicher.

EKG-/Ereignisspeicherung: Mindestens 8 Stunden EKG- und Ereignisdatenaufzeichnung.

Selbsttest-Datenspeicherung: Bis zu 10 Jahre.

KOMMUNIKATION

Kommunikation: USB-Schnittstelle.

GERÄT IM ÜBERBLICK

Herstellungsdatum: Siehe Etikett am unteren Ende des Hauptgeräts.

Garantie: 8 Jahre.



aluderm⁺ AED Wandschrank

Schützen Sie Ihren aluderm⁺ Defibrillator zuverlässig und sorgen Sie gleichzeitig für schnellen Zugriff im Notfall. Der aluderm⁺ AED-Wandschrank ist die ideale Aufbewahrungslösung für alle gängigen automatisierten externen Defibrillatoren (AED). Gefertigt aus robustem Stahlblech mit pulverbeschichteter Oberfläche bietet der Schrank optimalen Schutz vor Staub, Feuchtigkeit und mechanischen Einwirkungen. Dank seiner kompakten Bauweise lässt sich der AED-Schrank problemlos in Fluren, Eingangsbereichen oder Büros montieren. Er trägt zur besseren Sichtbarkeit und schnellen Verfügbarkeit des Defibrillators bei – ein entscheidender Faktor im Ernstfall.



Inhalt

AED Wandschrank L

AED Wandschrank S

Zusatzausstattung

aluderm LifePad®

Sticker „LifePad®“

Art.-Nr.

0102212

0102213

Mehr als nur ein AED

Die **aluderm⁺** AED A1 und A2 können Sie je nach Bedarf erweitern, z.B. mit dem **aluderm⁺** LifePad (zur Unterstützung der Herz-Lungen-Wiederbelebung) für Laien-Reanimation, einem AED-Rea-Set oder einem Set zur Blutstopfung. Alles passend in unserem modernen AED-Wandschrank inkl. Alarmfunktion.

Mit den aufeinander abgestimmten Produkten von **aluderm⁺** sind Sie im Notfall umfassend vorbereitet – vom Herzstillstand bis zur Versorgung von schweren Blutungen.



Inhalt

aluderm AED Wandschrank L

Zusatzausstattung

aluderm LifePad®
aluderm AED-Rea-Set
aluderm Notfallset Blutstillung

Art.-Nr.

0102212

0102087

1010275

0101126



aluderm⁺ LifePad[®]


Das aluderm⁺ LifePad[®] ist ein Hilfsprodukt für den Ersthelfer beim Herzstillstand und soll mehr Menschen dazu motivieren, Erste Hilfe zu leisten. Die Schritt-für-Schritt-Anleitung hilft Ihnen, einen kühlen Kopf zu bewahren. Durch die farbigen LEDs erhalten Sie visuelles Feedback für den optimalen Kompressionsdruck. Ein akustisches Signal gibt Ihnen die optimale Kompressionsfrequenz von 100 Schlägen pro Minute vor. Durch das flexible Material passt sich das aluderm⁺ LifePad[®] jeder Körperform an und kann bei Personen ab 12 Jahren angewendet werden.

Die Auflagefläche zeigt die genaue Positionierung der Hände für die Reanimation. Kann auch in Kombination mit einem Defibrillator verwendet werden (Signalton dafür abschaltbar).



aluderm⁺ AED-Rea-Set

Das aluderm⁺ AED-Rea-Set dient der schnellen und strukturierten Vorbereitung eines Patienten auf eine Defibrillation. Es enthält alle notwendigen Materialien, um im Notfall unverzüglich handeln zu können. Dazu gehören unter anderem Komponenten zur Vorbereitung der Haut und weiteres Zubehör zur Unterstützung der Maßnahme. Durch die gebündelte Bereitstellung der Materialien ermöglicht das Set eine effiziente und zeitkritische Versorgung des Patienten im Rahmen der Reanimation oder bei lebensbedrohlichen Herzrhythmusstörungen.

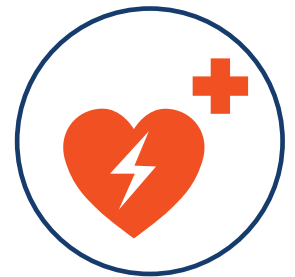

Inhalt

- 2× Alkoholtupfer einzeln
- 1× aluderm Handschuh-Set
mit 4 Stück Vinyl groß
- 1× Erste Hilfe-Kleiderschere
19cm kniegebogen st-st
- 1× aluderm Verbandtuch
DIN SO 40×60 cm
- 2× Beatmungstuch BT-DRY
- 1× Einmal-Rasierapparat

Inhalt
aluderm AED-Rea-Set


Art.-Nr.
1010275



aluderm⁺ Notfallset Blutstillung

Das aluderm⁺ Notfallset Blutstillung ist ein professionelles Notfallset zur schnellen Versorgung stark blutender Verletzungen. Es ermöglicht eine effektive Blutstillung bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes und ist ideal für Einsatzkräfte wie Polizei, Feuerwehr, Militär, Sicherheitsdienste sowie für Betriebe, öffentliche Einrichtungen, Veranstaltungen oder den privaten Bereich.

Komplett kompakt und sofort einsatzbereit, unterstützt das Set sowohl geschulte Ersthelfer als auch Laien dabei, im Notfall schnell und gezielt lebensrettende Maßnahmen einzuleiten. Mit dem aluderm Notfallset Blutstillung sind Sie optimal vorbereitet, um in kritischen Situationen Sicherheit und Verantwortung zu gewährleisten.

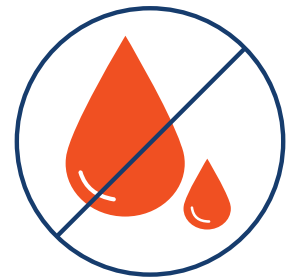

Inhalt

- 1 × aluderm Rettungsdecke
- 1 × aluderm20 midori Kompressen
- 1 × aluderm Beatmungstuch
- 1 × aluderm Druckverbandpäckchen
- 1 × Handschuh-Set mit 2 Stück Nitril groß
- 1 × Traumaschere
- 1 × PAX-Extremitäten Tourniquet P-E-T - schwarz
- 1 × aluderm WS-Fixierbinde 4 m × 8 cm

aluderm⁺ AED Zubehör


Für die zuverlässige Einsatzbereitschaft eines AED ist das passende Zubehör entscheidend. Dazu gehören insbesondere Elektroden (Pads), Batterien sowie gut sichtbare Hinweisschilder. Regelmäßiger Austausch von Pads und Batterien stellt sicher, dass der AED im Notfall sofort einsatzbereit ist. Hinweisschilder sorgen zudem dafür, dass der Standort des Geräts schnell gefunden werden kann und im Ernstfall keine Zeit verloren geht.



AED Batterie für A1 und A2



AED Elektrodenpads für A1 und A2

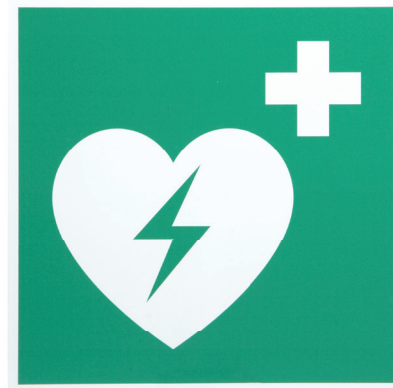

Rettungszeichen AED



Rettungs-Nasenschild AED

Inhalt

AED Batterie für A1 und A2
AED Elektrodenpads für A1 und A2
Rettungszeichen AED
Rettungs-Nasenschild AED

Art.-Nr.

0102204
0102205
8001022
1008027



Vivest P1 und P3 AED

Kompakt und Leicht

Im Vergleich zu herkömmlichen AEDs ist die ViVest P1 Pocket AED und ViVest P3 Pocket AED um zwei Drittel leichter und um drei Viertel kleiner im Volumen, bei gleicher therapeutischer Wirksamkeit. Mit einem Gewicht von weniger als 0,7 kg eignen sich die kompakten AEDs ideal für den Einsatz durch speziell geschultes Personal und können bequem in der Hausapotheke verstaut werden, sodass sie in kritischen Situationen jederzeit zur Hand sind.

Robuste Haltbarkeit und Zuverlässigkeit unter anspruchsvollen Bedingungen

Das Gerät ist nach IP65 staub- und wasserdicht und somit auch in rauesten Umgebungen einsetzbar. Dank seines verstärkten Designs ist es auch unter extremen Bedingungen beständig und zeigt eine bemerkenswerte Widerstandsfähigkeit gegenüber unterschiedlichen Umweltbelastungen. Darüber hinaus wurde es einem strengen Falltest aus 1,5 Metern Höhe unterzogen, der sicherstellt, dass es Notsituationen in rauen Umgebungen problemlos standhält.

Produkt Highlights

Patenterte Tiny Combine™-Technologie:

- Tragbar und leicht:
5,3 cm (H) × 8,6 cm (B) × 15 cm (L),
<0,7 kg
- IP65 schützt vor Staub und Feuchtigkeit
- Falltest aus 1,5 Metern bestanden
- Einschalten und Defibrillation mit nur einem Tastendruck
- Intelligente Sprachführung
- Optionale wiederaufladbare Batterie
- Intelligente Elektroden mit 5 Jahren Lebensdauer, geeignet für bifasische Schocks
- HLW-Unterstützung mit Metronom
- Schockbereit in weniger als 8 Sekunden
- Algorithmus zur Erkennung von Implantaten wie Herzschrittmachern und internen Defibrillatoren
- Kontinuierlicher VF/VT-Erkennungsmodus für Echtzeitschutz während des Patiententransports
- Erkennung von Herzschrittmacher-Impulsen
- Speicherung von 24 Stunden EKG-Daten
- Tägliche Selbsttests stellen sicher, dass das Gerät einsatzbereit ist
- Unterstützung für 4G-Mobilfunkkommunikation und GPSPositionierung
- Zugband-Öffnung an der Rückseite der Elektroden, in einer Sekunde zugänglich



Produktmodell:	P1 & P3 Pocket AED
Größe (H × B × L) cm:	5,3 × 8,6 × 15 cm
Gewicht (mit Akku & Pads)	weniger als 0,7 kg
Kontinuierlicher VF/VT-Erkennungsmodus:	Ja
Schutzklasse gegen Staub und Wasser:	IP65
Stoßfestigkeit bei	1,5 m



aluderm⁺ Erste-Hilfe-Koffer

Die aluderm⁺ Erste-Hilfe-Koffer verbinden modernes, funktionales Design mit klarer Struktur für den Notfall. Gefüllt mit einer hochwertigen DIN-Füllung, entsprechend der aktuellen ASR A4.3.

Dank der integrierten Wandhalterung lassen sie sich mühelos einhändig bedienen, bleiben stets übersichtlich organisiert, sind teilbar und verfügen über ein nachleuchtendes Material, das auch im Dunkeln für Orientierung sorgt. Dieses durchdachte Konzept gewährleistet optimale Sicherheit, klare Struktur und schnelle Hilfe im Ernstfall.



Erste-Hilfe-Koffer

aluderm Erste-Hilfe-Koffer DG S DIN 13157
 aluderm Erste-Hilfe-Koffer DG L DIN 13169
 aluderm Erste-Hilfe-Koffer DG S DIN 13157 + Augenspülung
 aluderm Erste-Hilfe-Koffer DG L DIN 13157 + Metallverarbeitung
 aluderm Erste-Hilfe-Koffer DG S DIN 13157 + Verbandstoffe

Art.-Nr.

3001407
 3001408
 3001420
 3001440
 3001421



aluderm⁺ Erste-Hilfe-Koffer DG S DIN 13157

Der aluderm⁺ Erste-Hilfe-Koffer („kleiner Verbandkoffer“) ist mit einer hochwertigen Füllung nach DIN 13157 ausgestattet und erfüllt die Anforderungen der aktuellen ASR A4.3. Er bietet eine zuverlässige, normgerechte Ausstattung für die betriebliche Erste Hilfe und eignet sich für Unternehmen, Werkstätten, öffentliche Einrichtungen und andere Arbeitsbereiche.

Ein „kleiner Verbandkoffer“ nach DIN 13157 deckt die Erste-Hilfe-Bedarfsmengen wie folgt ab: in Verwaltungs- und Handelsbetrieben bis 50 Beschäftigte, in Herstellungsbetrieben bis 20 Beschäftigte und auf Baustellen bis 10 Beschäftigte.

Die übersichtliche Innenaufteilung ermöglicht einen schnellen Zugriff auf alle Verbandstoffe, während sämtliche Inhalte geschützt untergebracht sind.

Artikelattribute

- Höhe: 241 mm
- Breite: 287 mm
- Tiefe: 152 mm
- Material: ABS-Kunststoff



Inhalt

aluderm Erste-Hilfe-Koffer DG S DIN 13157
 1 × Wandhalterung orange S
 1 × Füllung Standard DIN 13157

Art.-Nr.

3001407
 0100601
 3003018

aluderm⁺ Erste-Hilfe-Koffer DG L DIN 13169

Der aluderm⁺ Erste-Hilfe-Koffer („großer Verbandkoffer“) ist mit einer hochwertigen Füllung nach DIN 13169 ausgestattet und erfüllt die Anforderungen der aktuellen ASR A4.3. Er bietet eine umfassende, normgerechte Ausstattung für die betriebliche Erste Hilfe und eignet sich für Unternehmen, Werkstätten, öffentliche Einrichtungen und andere Arbeitsbereiche mit erhöhtem Versorgungsbedarf.

Ein „großer Verbandkoffer“ nach DIN 13169 deckt die Erste-Hilfe-Bedarfsmengen wie folgt ab: in Verwaltungs- und Handelsbetrieben bis 100 Beschäftigte, in Herstellungsbetrieben bis 50 Beschäftigte und auf Baustellen bis 20 Beschäftigte.

Die übersichtliche Innenaufteilung ermöglicht einen schnellen Zugriff auf alle Verbandstoffe und Materialien, während sämtliche Inhalte geschützt untergebracht sind.

Artikelattribute

- Höhe: 384 mm
- Breite: 452 mm
- Tiefe: 152 mm
- Material: ABS-Kunststoff



Inhalt

aluderm Erste-Hilfe-Koffer DG L 13169
 1 × Wandhalterung orange L
 1 × Füllung Standard DIN 13157

Art.-Nr.

3001408
 0100602
 3003018



aluderm⁺ Erste-Hilfe-Koffer + Zusatzfüllung

Bei den aluderm⁺ Erste-Hilfe-Koffern mit Zusatzfüllung (z.B. Verbandstoffe, Augenspülung oder Metallverarbeitung), ist die hochwertige DIN Füllung im oberen Teil gut durch eine praktische Sicherheitsplombe geschützt, sodass unbefugte Entnahmen verhindert werden. Gleichzeitig bleiben die zusätzlichen Materialien im unteren Teil jederzeit frei zugänglich und sofort einsatzbereit.

Ihre Vorteile

- viel Platz für die Erste-Hilfe-Füllung
- schnell zu öffnen
- einfach in der Anwendung
- smarte Wandhalterung
- leuchtet ohne Strom
- Sicherheitsplombe schützt den Inhalt gemäß DIN
- aluderm20⁺ 20 Jahre Haltbarkeit auf sterile Verbandstoffe



Die Sicherheitsplombe schützt den Inhalt nach DIN. Die Zusatzfüllung kann einfach entnommen werden.



aluderm Erste-Hilfe-Koffer + Zusatzfüllung

aluderm Erste-Hilfe-Koffer DG S DIN 13157 + Augenspülung
aluderm Erste-Hilfe-Koffer DG S DIN 13157 + Verbandstoffe
aluderm Erste-Hilfe-Koffer DG L DIN 13157 + Metallverarbeitung

Art.-Nr.

3001420
3001421
3001440

aluderm⁺ Erste-Hilfe-Koffer DG S DIN 13157 + Verbandstoffe

Dieser moderne aluderm⁺ Erste-Hilfe-Koffer ist mit einer hochwertigen DIN 13157 Füllung gemäß aktueller ASR A4.3 ausgestattet und bietet darüber hinaus zusätzliche Verbandstoffe für eine erweiterte Erstversorgung. Damit ist er ideal für Arbeitsbereiche mit erhöhtem Bedarf an Verbandmaterial.

Die normgerechte DIN-Füllung befindet sich im oberen Teil des Koffers und ist durch eine praktische Sicherheitsplombe geschützt. So werden unbefugte Entnahmen verhindert und der vollständige, normkonforme Zustand bleibt jederzeit erkennbar.

Die zusätzlichen Verbandstoffe sind separat im unteren Bereich untergebracht und jederzeit frei zugänglich. Dadurch stehen wichtige Materialien im Notfall sofort zur Verfügung, ohne den geschützten DIN-Bereich öffnen zu müssen.

Artikelattribute

- Höhe: 241 mm
- Breite: 287 mm
- Tiefe: 152 mm
- Material: ABS-Kunststoff

Die Sicherheitsplombe schützt den Inhalt nach DIN. Die Zusatzfüllung kann einfach entnommen werden.



Inhalt

aluderm Erste-Hilfe-Koffer DG S DIN 13157 + Verbandstoffe

- 1 × Füllung Standard DIN 13157
- 1 × Wandhalterung orange S
- 3 × aluderm20 Komresse einzeln 10 × 10 cm
- 2 × aluderm Verbandpäckchen DIN mittel
- 1 × aluderm Verbandpäckchen DIN groß
- 3 × WS-Fixierbinde 4 m × 6 cm
- 1 × aluderm Pore 5 m × 6 cm
- 1 × aluderm Sortiment für Betriebsverbandkasten DIN 13157
- 1 × aluderm Kälte-Sofortkomresse klein
- 1 × Handschuh-Set mit 4 Stück Vinyl groß
- 1 × aluderm Wundspray Hydrogel 60 ml

Art.-Nr.

- 3001421
- 3003018
- 0100601
- 1003208
- 1003372
- 1003373
- 1004101
- 1008111
- 1009152
- 1012042
- 1010073
- 1008318



aluderm⁺ Erste-Hilfe-Koffer DG S DIN 13157 + Augenspülung

Dieser hochwertige aluderm⁺ Erste-Hilfe-Koffer überzeugt durch sein modernes Design und eine durchdachte Innenaufteilung. Ausgestattet mit einer DIN 13157 Füllung gemäß aktueller ASR A4.3 erfüllt er alle Anforderungen an eine normgerechte betriebliche Erste Hilfe.

Die DIN-Füllung ist im oberen Bereich des Koffers untergebracht und durch eine praktische Sicherheitsplombe geschützt, die unbefugte Entnahmen zuverlässig verhindert und den ordnungsgemäßen Zustand jederzeit sichtbar macht.

Im unteren Bereich befinden sich Augenspülung sowie zusätzliche Materialien für Augenverletzungen, die unabhängig davon jederzeit frei zugänglich und sofort einsatzbereit sind. So ist im Ernstfall schnelles, gezieltes Handeln möglich.

Artikelattribute

- Höhe: 241 mm
- Breite: 287 mm
- Tiefe: 152 mm
- Material: ABS-Kunststoff

Die Sicherheitsplombe schützt den Inhalt nach DIN. Die Zusatzfüllung kann einfach entnommen werden.



Inhalt

aluderm Erste-Hilfe-Koffer DG S 13157 + Augenspülung
 1 × Füllung Standard DIN 13157
 1 × Wandhalterung orange S
 2 × aluderm Augenspülung 0.9% Sodium Chloride 200 ml
 1 × aluderm neutralisierende Augenspülung pH neutral 4.9% Phosphate 200 ml
 2 × WS-Fixierbinde 4 m × 8 cm
 1 × aluderm Pore 5 m × 2,5 cm
 2 × aluderm Augenkomresse DuOcul

Art.-Nr.

3001420
 3003018
 0100601
 2010062
 2010064
 1004102
 1008111
 1003340

aluderm⁺ Immobilisation

Die aluderm⁺ Alu-Polsterschiene dient zur externen Stabilisierung, Ruhigstellung und Lagerung von Extremitäten oder Körperbereichen. Die Schiene besteht aus einem formstabilen Aluminiumkern, der eine individuelle Anpassung an die anatomischen Gegebenheiten ermöglicht. Die integrierte Polsterung sorgt für eine gleichmäßige Druckverteilung und erhöht den Tragekomfort. Gleichzeitig trägt sie zum Schutz der Haut und empfindlicher Gewebestrukturen bei.

Durch das geringe Eigengewicht und die hohe Stabilität eignet sich die Alu-Polsterschiene für den vielseitigen Einsatz in der Notfallversorgung, im Rettungsdienst, in Arztpraxen sowie in Krankenhäusern.



Inhalt

aluderm Alu-Polsterschiene mini 11 × 5 cm
 aluderm Alu-Polsterschiene klein 50 × 11 cm
 aluderm Alu-Polsterschiene groß 100 × 11 cm
 aluderm Alu-Polsterschiene Satz 4-teilig

Art.-Nr.

1011071
 1011072
 1011073
 1011074



aluderm⁺ Einhand-Venenstauer

Der aluderm⁺ Einhand Venenstauer ist ideal für eine schnelle und sichere Anwendung. Mit seinem innovativen 2-Stufen-Sicherheitsverschluss bietet dieser Venenstauer eine besonders einfache Handhabung. Er ermöglicht ein sofortiges Öffnen, ohne dass das Band vorher entspannt werden muss.

Alternativ kann der Venenstauer auch in zwei Schritten geöffnet werden: zunächst wird das Band entspannt, dann wird es geöffnet. Hierzu wird das Band durch Herunterdrücken der geriffelten Taste gelöst und anschließend durch Zusammendrücken der gegenüberliegenden Knöpfe geöffnet. Das Produkt ist CE-gekennzeichnet und wird einzeln mit Gebrauchsanleitung im Polybeutel geliefert.



Inhalt

aluderm Einhand-Venenstauer

Art.-Nr.

1010057





© W.Söhngen GmbH . Produktdarstellung und Gestaltung alle Rechte bei W.Söhngen GmbH . Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der W.Söhngen GmbH. Abbildungen können abweichen. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der W.Söhngen GmbH.
[aluderm/AGB](#)

W.Söhngen GmbH . Platter Str. 84 . 65232 Taunusstein . Deutschland
info@aluderm.de . +49 (0)6128 873 0 . @ aluderm_de . www.aluderm.de

aluderm+ ist eine
Marke der W.Söhngen GmbH

Stand: 07-2026